

Educación sobre tubo G: Bombas de alimentación en el hogar

Materiales proporcionados por la compañía de bombas de alimentación.

1. Tubos/bolsas para alimentación
2. Palo para colocar bomba
3. Bomba de alimentación
4. Mochila para alimentación móvil
5. Juegos de extensión (8 por mes) - viene con accesorio de árbol de Navidad
6. Set de alimentación por gravedad de emergencia si la bomba se rompe
7. Botones de repuesto para que el médico los cambie a medida que el bebé crece
8. Fórmula
9. Gasa partida para cambios de vendaje
10. Toallitas estériles de solución salina disponibles
11. Cinta de todo tipo disponible
12. Catéteres disponibles para colocar en el agujero si el botón se sale

Pasos para utilizar la bomba de alimentación en casa:



1. Encienda la bomba presionando el botón de encendido/apagado.
2. Presione el botón **"rate/dose"** hasta que vea **"rate"** en la pantalla. Ajuste la **"rate"** a _____.
(Puede guardarlo o cambiarlo cada vez.)
3. Presione nuevamente el botón **"rate/dose"** hasta que vea **"dose."** Ajuste la dosis a _____.
(Puede guardarlo o cambiarlo cada vez.)
4. Presione el botón **"food/type"**. Elija fórmula o leche materna.
(Debe hacer esto cada vez.)
5. Abra la puerta presionando entre las dos líneas.
6. Cargue el tubo con leche. Asegúrese de que la parte de la banda de goma esté a la izquierda.
(Solo encaja de una manera y se enganchará en su lugar.)
7. Cierre la puerta.
8. Conecte el tubo de extensión.
(El tubo del hospital puede necesitar una pieza extra que se parece a un árbol de Navidad. Los materiales que mandan a su casa ya los tienen.)
9. Presione y mantenga presionado el botón **"prime"** hasta que la leche o fórmula llene el tubo.
Suelte para detener.

10. Presione “run” para iniciar.

-Escuchará que la bomba está funcionando.

-Verá un círculo con flecha moviéndose en la pantalla.


Importante: Si se omite algún paso, la bomba no funcionará.

12. Cuando se haya **terminado** la leche Retire la sonda de alimentación del bebé y cierre el tapón.

-Agregue una pequeña cantidad de agua (5–10 mL) a la bolsa

-Use el botón de “prime” para hacer pasar agua por el tubo para limpiarlo. Puede dejar que el agua vaya a un vaso y después tirarla a la basura.

13. Haga pasar aire por el tubo después del agua para ayudar a secarlo.

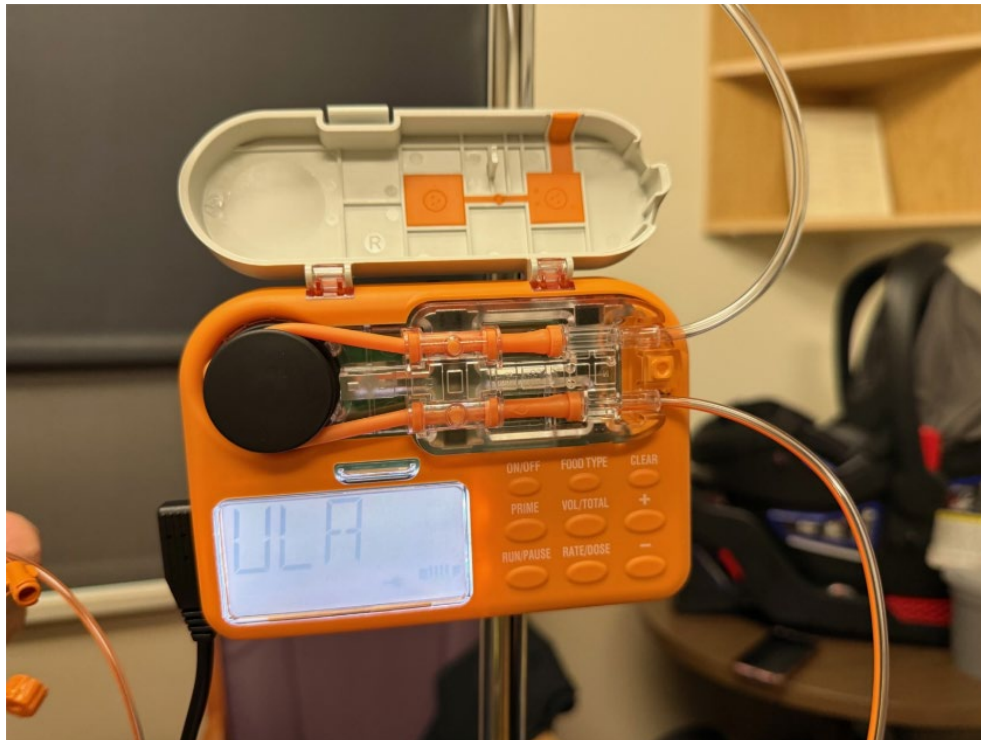

Puntos importantes:

Cambie la bolsa de alimentación y el tubo cada 24 horas.

Lave el conjunto de extensión (la parte que se conecta a su bebé) después de cada alimentación y continúe usándolo.

Después de cada alimentación:


Haga pasar agua limpia a temperatura ambiente por el tubo usando el botón "priming"

Luego haga pasar aire por el tubo usando "priming" para ayudar a secarlo

Agregue 2–3 mL extra a la cantidad de alimentación porque algo se quedará en el tubo y se perderá

El número de teléfono en la bomba lo conecta con enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana si tiene algún problema con la bomba

Dos tipos de dispositivos de alimentación: una bolsa y un lugar para conectar directamente un biberón:

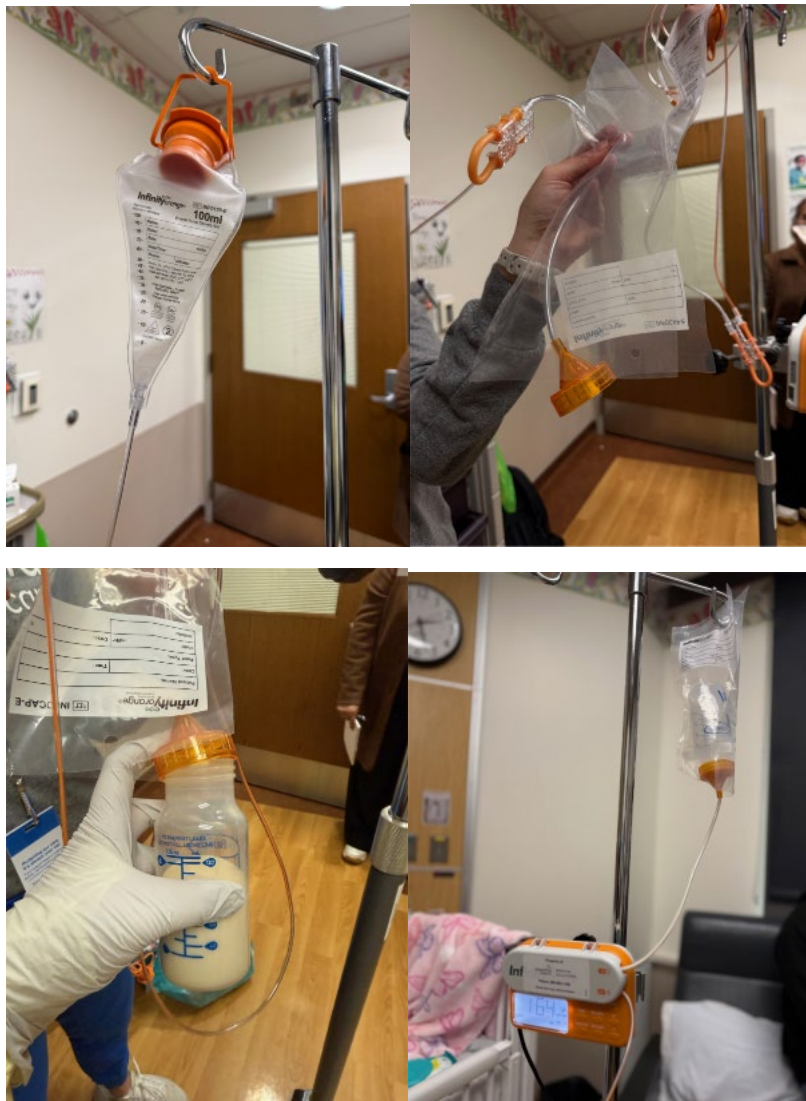

Como Cambiar el vendaje:

1. Lávese las manos.
2. Retire el vendaje viejo.
3. Limpie la piel alrededor de la sonda G con agua estéril o solución salina. Luego seque bien el área.
4. Lávese las manos nuevamente. Póngase guantes limpios si los tiene.
5. Gire el botón completamente alrededor, luego gírelo un poco más (aproximadamente $\frac{1}{4}$ de giro).
6. Coloque gasa dividida alrededor del sitio.
7. Pegue la gasa a la piel como la foto.
8. Asegúrese de que parte de la cinta pase sobre el botón para ayudar a que no se mueva.



Cómo conectar un tubo de extensión al botón para una alimentación:

1. Alinee las dos líneas negras en el botón y el tubo de extensión.
2. Presione suavemente hacia abajo.
3. Gire el tubo de extensión en la dirección de la flecha para asegurarlo en su lugar.

